PODOMONIUM / TROCKENTECHNIK MIT ABSAUGUNG

Jimbo

Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise



CS20508	Bis 40.000 U/min	2,35 mm
Artikelnummer	Gerätehöchstdrehzahl	Fräserschaft

INHALT

02 Sicherheit vor dem Start

03 Bedienfeld und Rückseite

04 Aufstellen und anschließen

05 Drehzahl und Absaugung einstellen

06 Fräser sicher wechseln

07 Filterbeutel wechseln

08 Reinigung und Handstückpflege

09 Störungen, Wartung und Service

10 Technische Daten und Unterlagen

01 / SICHERHEIT

Sicherheit vor dem Start

Für eingewiesene Fachkräfte in der professionellen Fußpflege.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur trockenen Bearbeitung von Nägeln und Hornhaut mit geeigneten rotierenden Instrumenten und aktiver Staubabsaugung. Für den Einsatz in trockenen Innenräumen. Haut und Schleimhaut dürfen bei bestimmungsgemäßer Anwendung nicht durchdrungen werden.

Strom und Feuchtigkeit

Nur an eine geeignete Steckdose mit Schutzleiter anschließen. Netzstecker und Hauptschalter zugänglich halten. Bei Schäden an Kabel, Stecker, Gehäuse oder Handstück Gerät außer Betrieb lassen. Flüssigkeiten und Wassernebel vom Gerät und Absaugweg fernhalten.

Rotierender Fräser

Haare binden und Schmuck, weite Kleidung und Kabel vom Fräser fernhalten. Fräser vor dem Start auf festen Sitz prüfen. Handstück und Behandlungsbereich stabil führen, mit leichtem Druck arbeiten und das Werkzeug erst bei Stillstand berühren.

Staub und persönlicher Schutz

Mit eingesetztem Filterbeutel und aktiver Absaugung arbeiten. Schutzbrille, geeigneten Atemschutz und flüssigkeitsundurchlässige Einmalhandschuhe tragen. Den betrieblichen Hygieneplan und die Gefährdungsbeurteilung beachten.


Fehlstart und Störung

Das Fußpedal so ablegen, dass es nicht versehentlich betätigt wird. Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Bei Unwucht, Hitze, Geruch, Blockade oder lockerem Werkzeug sofort stoppen. Gerät geschlossen halten und Reparaturen dem Fachservice überlassen.

02 / BEDIENFELD

Bedienfeld und Rückseite

Vorderseite am Originalgerät. Die Nummern entsprechen der Legende unten.

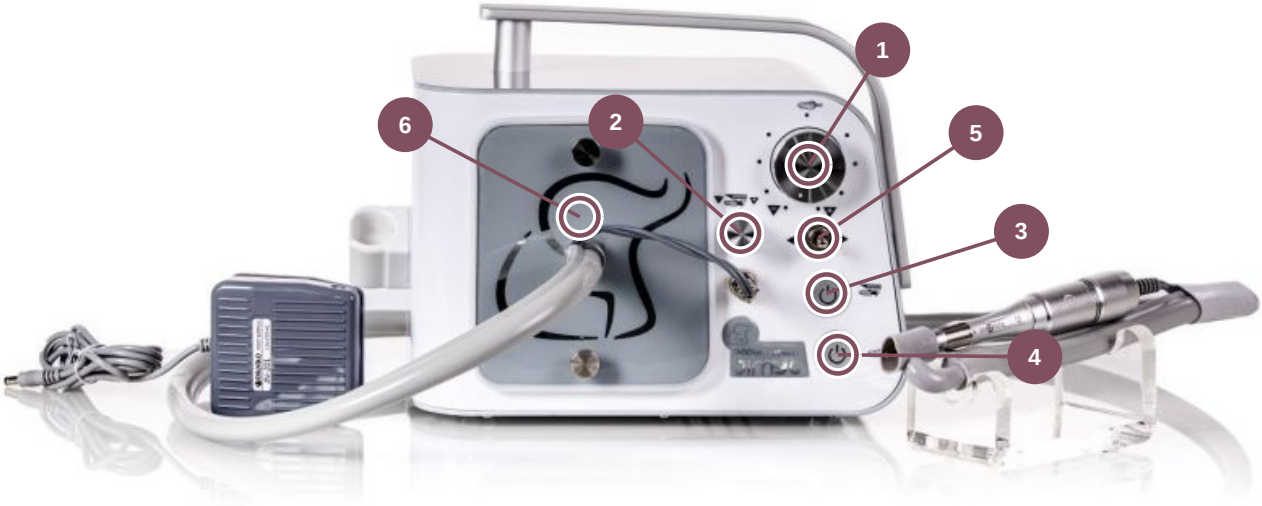

1 Großer Regler
Drehzahl des Fräsers

2 Kleiner Regler
Saugkraft

3 Oberer Taster
Absaugung Ein/Aus

4 Unterer Taster
Fräsermotor Ein/Aus

5 Richtungswahl
Rechts- oder Linkslauf

6 Staubkammer
Filterbeutel hinter der Abdeckung



Hinten am Gerät

Der Hauptschalter sitzt links hinten im Netzanschlussbereich. Die Buchse für das Original-Fußpedal erkennst Du am Fußschaltersymbol. Im Foto verdecken Leitungen einen Teil des Anschlussbereichs.

03 / VORBEREITUNG

Aufstellen und anschließen

Gerät, Handstück und Zubehör vor der ersten Inbetriebnahme kontrollieren.



ORIGINAL · SCHLAUCH MIT KABEL



ORIGINAL · CARBON-STAUBFILTERBEUTEL

01 Arbeitsplatz vorbereiten

Steuergerät trocken, eben und standsicher aufstellen. Lüftungsschlitze frei lassen und Netzstecker, Hauptschalter und Bedienelemente erreichbar halten.

02 Filter und Schlauch anschließen

Bei ausgeschaltetem und netzgetrenntem Gerät passenden Filter einsetzen. Staubkammer schließen. Absaugschlauch am vorgesehenen Anschluss koppeln, Leitungen ohne Zug oder Knicke führen.

03 Handstück und Fußpedal kontrollieren

Handstück, Stecker und Leitungen auf Schäden prüfen. Originalpedal bei ausgeschaltetem, netzgetrenntem Gerät an der gekennzeichneten Buchse anschließen.

04 Fräser einsetzen und Anschluss prüfen

Nur einen passenden, trockenen und unbeschädigten Fräser einsetzen (Seite 6). Netzversorgung mit dem Typenschild abgleichen und das Gerät an eine geeignete Steckdose mit Schutzleiter anschließen.

Vor dem Einschalten

Handstück sicher in der Hand halten oder in die vorgesehene Ablage legen.

04 / BEDIENUNG

Drehzahl und Absaugung einstellen

Zwei Originalaufnahmen zeigen den großen Drehzahlregler und den kleinen Saugkraftregler.



Großer Regler

Drehzahl des eingesetzten Fräsers einstellen.



Kleiner Regler

Saugkraft der eingeschalteten Absaugung einstellen.

01 Hauptschalter hinten einschalten

Filter, Schlauch und Fräsersitz prüfen. Hauptschalter auf I stellen. Bei stillstehendem Motor die Drehrichtung wählen.

02 Drehzahl und Absaugung einstellen

Eine niedrige, zum Fräser passende Startdrehzahl einstellen. Absaugung mit dem oberen Taster vorne einschalten, Saugkraft am kleinen Regler einstellen und den Luftstrom prüfen.

03 Fräser starten und kontrollieren

Den unteren Taster vorne drücken. Mit sicher gehaltenem Handstück außerhalb der Behandlung prüfen, ob der Fräser ruhig läuft. Funktion des Originalpedals vor der Behandlung testen.

04 Unterbrechen oder beenden

Fräsermotor vorne stoppen und Stillstand abwarten. Absaugung am oberen Taster ausschalten. Bei Arbeitsende Hauptschalter auf 0 stellen. Zur Außerbetriebnahme Netzstecker ziehen.

Nach Standby

Vor dem Neustart Drehzahl und Saugkraft prüfen. Das Gerät kann die zuletzt eingestellten Werte übernehmen.

05 / FRÄSERWECHSEL

Fräser sicher wechseln

Vier Standbilder aus dem Jimbo-Video zeigen die Bewegung am Spannring.

Zuerst vorne ausschalten und Stillstand abwarten

Drücke den unteren Fräser-Taster (Seite 3, Nr. 4). Die bestehende Jimbo-Sicherheitsunterlage verlangt vor dem Wechsel zusätzlich das Ausschalten am Hauptschalter und das Ziehen des Netzsteckers. Halte diese Vorgabe ein, bis die für Deine Ausführung geltenden Unterlagen geklärt sind.



01 Spannring öffnen

Spannring bis zum Klick in Öffnungsstellung drehen.



02 Fräser herausziehen

Alten Fräser gerade aus der Aufnahme ziehen.



03 Fräser einsetzen

Passenden Fräser gerade bis zum Anschlag einsetzen.



04 Spannring festdrehen

Beim gezeigten Drehverschluss linksherum bis zum Klick verriegeln.

Vor dem Wiederanlauf

Festen Sitz bei ausgeschaltetem Motor prüfen. Nur trockene, unbeschädigte Fräser mit 2,35 mm Schaft verwenden. Die niedrigste zulässige Drehzahlgrenze von Gerät, Handstück und Werkzeug einhalten.

06 / FILTER UND ABSAUGUNG

Filterbeutel wechseln

Der Schleifstaub wird am Handstück erfasst und im Filterbeutel gesammelt.



CARBON-STAUBFILTERBEUTEL CS00021



ABSAUGSCHLAUCH MIT KABEL

01 Stoppen und Netzstecker ziehen

Fräsermotor stoppen, Stillstand abwarten und Absaugung ausschalten. Hauptschalter auf 0 stellen und Netzstecker ziehen. Atemschutz tragen.

02 Staubkammer öffnen und Beutel entnehmen

Abdeckung öffnen. Alten Beutel vorsichtig entnehmen und nach dem betrieblichen Hygieneplan entsorgen. Staubaufwirbelung vermeiden.

03 Passenden Beutel einsetzen

Neuen Beutel mittig halten, auf den vorgesehenen Anschluss schieben und auf sicheren Sitz achten. Die Jimbo-Unterlage nennt CS00020 oder CS00021. Staubkammer wieder schließen.

04 Saugwirkung prüfen

Schlauch knickfrei verlegen. Nach dem Wiedereinschalten mit stillstehendem Fräser prüfen, ob Luft am Einlass angesaugt wird. Bei fehlender Saugwirkung die Behandlung unterbrechen.

Kontroll- und Wechselintervall

Filter alle 10 Betriebsstunden prüfen. Einen vollen Filter sofort wechseln, spätestens nach 50 Betriebsstunden.

07 / HYGIENE UND PFLEGE

Reinigung und Handstückpflege

Oberflächenhygiene nach jeder Behandlung. Pflege nur an freigegebenen Bauteilen.

01 Abschalten und vom Netz trennen

Fräsermotor stoppen, Stillstand abwarten, Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Den Fräser nach Abschnitt 05 entnehmen und separat nach Instrumentenanleitung und Hygieneplan aufbereiten.

02 Reinigen und desinfizieren

Rückstände gemäß Modellanleitung abwischen. Freigegebene Mittel und deren Einwirkzeiten beachten. Keine Flüssigkeit in Buchsen, Öffnungen oder Motorteile gelangen lassen. Das Vorstück der gezeigten Ausführung gehört nicht ins Ultraschallbad.



03 Teilbares Handstück pflegen

Bei der gezeigten E-Typ-Ausführung lässt sich das freigegebene Vorstück gerade vom Motor abziehen. Das Pflegeprodukt nur mit dem passenden Adapter und nach dessen Anleitung am Vorstück anwenden.

Bild aus der Originalaufnahme. Die gezeigte Pflege gilt für das dafür freigegebene Vorstück.

Motor und Kabel schützen

Motor und Kabel bleiben trocken und frei von Öl oder Spray. Motor nicht autoklavieren. Verschraubte Gehäuseteile und Lager geschlossen lassen.

Pflegeintervall

Die vorhandene Jimbo-Unterlage nennt zweimal wöchentlich für das freigegebene Vorstück.

08 / STÖRUNGEN UND SERVICE

Störungen, Wartung und Service

Bei wiederkehrenden Störungen oder Schäden übernimmt der Fachservice.

Sofort stoppen

Bei Rauch, ungewöhnlichem Geruch, Hitze, Vibration, Blockade oder lockerem Fräser Gerät abschalten und, sofern gefahrlos möglich, den Netzstecker ziehen. Erst nach Klärung der Ursache weiterverwenden.

Gerät oder Motor startet nicht

Bei ausgeschaltetem und netzgetrenntem Gerät von außen Netzleitung, Handstückanschluss und gegebenenfalls Pedal prüfen. Bei fortbestehendem Fehler Fachservice kontaktieren.

Fräser sitzt locker, läuft unruhig oder lässt sich schwer einsetzen

Stoppen. Bei netzgetrenntem Gerät Aufsatz und Schaft prüfen, beschädigten Aufsatz ersetzen. Fräser nicht mit Kraft einsetzen. Bei wiederholter Störung Gerät außer Betrieb lassen.

Absaugung schwach oder ausgefallen

Behandlung unterbrechen. Netzgetrennt Beutel, Deckel und sichtbare Schlauchknicke prüfen. Bei Überhitzung abkühlen lassen. Bei erneutem Abschalten Fachservice einschalten.

Fußpedal reagiert unzuverlässig

Gerät ausschalten und vom Netz trennen. Pedalanschluss äußerlich prüfen. Bei Defekt oder wiederkehrender Fehlfunktion Fachservice kontaktieren.

Wartungsmeldung oder wiederholte Abschaltung

Behandlung beenden. Meldung, Modell und Seriennummer notieren. Fachservice kontaktieren. Die vorhandene Unterlage empfiehlt eine jährliche Fachwartung.

Servicekontakt und Angaben für Rückfragen findest Du auf Seite 10.

09 / TECHNISCHE DATEN

Technische Daten und Unterlagen

Technische Angaben für die dokumentierte Ausführung CS20508.

Modell und Artikelnummer	PodoMonium Jimbo · CS20508
Technik	Trockentechnik mit regelbarer Staubabsaugung
Gerätehöchstdrehzahl	Bis 40.000 U/min
Fräserschaft	2,35 mm
Vakuummotor	200 W laut Produktangabe
Netzanschluss	Angaben auf dem Typenschild beachten

Umgebung und Transport

Nur in trockenen, geschlossenen Räumen verwenden. Die vorliegende Jimbo-Unterlage nennt für den Betrieb +10 bis +26 °C und 25 bis 75 % relative Luftfeuchte ohne Kondensation. Handstück und Schlauch für den Transport knickfrei sichern.

Service und Entsorgung

Altgerät bei einer Elektroaltgeräte-Sammelstelle abgeben. Für Rückfragen Artikelnummer, Seriennummer und Handstückausführung bereithalten. Reparaturen und Wartung gehören in eine Fachwerkstatt.

CS Kosmetikvertrieb · Service

+49 2568 8584008 · info@cs-kosmetikvertrieb.de · Kontaktformular

GRUNDLAGEN UND WEITERFÜHRENDE UNTERLAGEN

Jimbo-Gebrauchsanleitung CS20508 aus dem Shop-Bestand, insbesondere S. 3–8 und 11–21. Bilder aus dem Jimbo-Video und aus der CS-Produktgalerie. Jimbo-Produktseite · Bestehende Jimbo-Sicherheitsunterlage.

Bewahre diese Anleitung griffbereit auf und gib sie bei Weitergabe des Geräts mit.